

UltraSonicWaves

ULTRASOUND THERAPY

1.0



ITALIANO
Programmi per l'uso **estetico** e **benessere**



MESIS

Ver.10/2024

Gentile Cliente,
ci congratuliamo con Lei per la scelta effettuata. Ha ora a sua disposizione un prodotto dalle grandi prestazioni, costruito secondo le più recenti e severe normative europee, e in grado di garantire un elevato standard di qualità e di sicurezza. La preghiamo di prestare molta attenzione a questo manuale leggendolo in ogni sua parte al fine di familiarizzare con l'apparecchio.

INDICE

INFORMAZIONI ED ASSISTENZA	3
PROGRAMMI ESTETICA E BENESSERE	4
PROGRAMMI ESTETICA E BENESSERE SPECIFICHE	8

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, copiata o divulgata con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta di HSD S.r.l. Eventuali infrazioni saranno perseguite nei modi e nei tempi previsti dalla Legge.
Tutti i nomi ed i marchi citati in questo manuale appartengono ai rispettivi proprietari.

© 2024 HSD S.r.l. RSM
Edizione Settembre 2024 - Rel. 0.2

INFORMAZIONI ED ASSISTENZA

assistentatecnica@mesis.eu
www.mesis.eu

DISTRIBUTORE:

VIMA S.R.L.
VIA CONDOVE 11
10129, TORINO, ITALY
assistentatecnica@mesis.eu
www.mesis.eu

FABBRICANTE:

HSD S.R.L.
STRADA ACQUASALATA,
11 - INT. 6 - 47899
SERRAVALLE RSM
info@hds.sm

PROGRAMMI ESTETICA E BENESSERE

Note applicative per utilizzare correttamente l'apparecchio, sapendo quale programma scegliere e l'azione che esso svolge, combattendo così il proprio inestetismo il più efficacemente possibile.

URTO		LEVIGANTE	
AZIONE	L'irradiazione ultrasonora in questa azione determina un massaggio di notevole intensità, che per mezzo delle oscillazioni penetra più in profondità nell'epidermide.	AZIONE	Richiama il plasma pulito in tutto lo spessore del derma e ridona la giusta dimensione fisiologica al connettivo cutaneo, migliorando sia l'elasticità che l'irregolarità superficiale della epidermide.
QUANDO	Va utilizzato in tutti quegli stadi avanzati di cellulite localizzata, specialmente nel caso di cellulite molle o flaccida.	QUANDO	È indicato in tutti quegli inestetismi cellulitici, nei quali la superficie cutanea presenta delle irregolarità, come la classica "Pelle a buccia d'arancia" e "Pelle Ruvida".
MODELLANTE		DRENANTE	
AZIONE	Questa terapia viene utilizzata ampiamente nei casi di lipodistrofie localizzate rompendo il tessuto fibronico presente che ostacola la circolazione sia ematica che linfatica.	AZIONE	La sua azione benefica facilita il drenaggio dei connettori linfatici e delle rispettive stazioni ghiandolari annesse, facilitando il riassorbimento dei liquidi.
QUANDO	Beneficiando della sua caratteristica nel modellare e stimolare è particolarmente indicato nel caso di cellulite dura o solida.	QUANDO	Beneficiando della sua azione drenante, è consigliato nel caso di cellulite edematosa, essendo i liquidi la principale causa, anch'esso consigliato contro la Pelle a buccia d'arancia.
MANTENIMENTO		RIATTIVANTE	
AZIONE	Il suo effetto di stimolazione sulla circolazione sanguigna distrettuale, migliora il trofismo cutaneo e l'ossigenazione cellulare, liberando i liquidi in eccesso e le tossine dal connettivo sottocutaneo.	AZIONE	Stimola e riattiva la circolazione sanguigna e linfatica per un miglioramento cutaneo, riattivando il metabolismo cellulare, favorendo lo scambio di liquidi tra le cellule.
QUANDO	È indicato come mantenimento del ciclo di sedute svolte, per non perdere i risultati raggiunti.	QUANDO	È indicato soprattutto negli stadi iniziali della cellulite, in quanto stimola e riattiva il metabolismo assopitosi.
VEICOLANTE		MASSAGGIO PER IL VISO	
AZIONE	Favorisce la penetrazione di creme, gel o altri prodotti nel tessuto biologico, favorendone l'assorbimento e quindi il loro effetto, indicato anche per trattamenti depilatori.	AZIONE	Incrementa l'elasticità e il tono dei tessuti riducendo la possibile formazione di cicatrici post acne e aumenta l'effetto di prodotti antiacne. Il trattamento va eseguito una volta al giorno.

PROGRAMMI ESTETICA E BENESSERE

IT

ESFOLIANTE PER IL VISO		LEVIGANTE PER IL VISO	
AZIONE	Riattiva la circolazione e favorisce il ricambio cellulare: la pelle viene purificata in profondità e preparata ad assorbire meglio i principi attivi di creme idratanti e antirughe. L'azione esfoliante ha effetti benefici anche sui punti neri che con le onde ultrasoniche si riducono o addirittura scompaiono. Il trattamento va eseguito una volta al giorno.	AZIONE	Leviga e distende le rughe e se usato in maniera preventiva può ritardare l'invecchiamento della pelle o impedire che si aggravi. L'ultrasuono grazie ai suoi effetti termici, riscalda i tessuti e favorisce processi biochimici e metabolici. Il trattamento va eseguito una volta al giorno.

N° PROGRAMMA -TRATTAMENTO	
1	CELLULITE GLUTEI
2	# CELLULITE GLUTEI
3	CELLULITE ADDOME
4	# CELLULITE ADDOME
5	CELLULITE ARTI INFERIORI
6	# CELLULITE ARTI INFERIORI
7	CELLULITE ARTI SUPERIORI
8	# CELLULITE ARTI SUPERIORI
9	TESSUTO ADIPOSO
10	# TESSUTO ADIPOSO
11	TONIFICAZIONE TESSUTI
12	# TONIFICAZIONE TESSUTI
13	ESTERNO BRACCIA URTO
14	ESTERNO BRACCIA MODELLANTE
15	ESTERNO BRACCIA MANTENIMENTO
16	# ESTERNO BRACCIA URTO
17	# ESTERNO BRACCIA MODELLANTE
18	# ESTERNO BRACCIA MANTENIMENTO
19	INTERNO BRACCIA URTO
20	INTERNO BRACCIA MODELLANTE
21	INTERNO BRACCIA MANTENIMENTO
22	# INTERNO BRACCIA URTO
23	# INTERNO BRACCIA MODELLANTE
24	# INTERNO BRACCIA MANTENIMENTO
25	FIANCHI E SCHIENA URTO
26	FIANCHI E SCHIENA MODELLANTE
27	FIANCHI E SCHIENA MANTENIMENTO
28	# FIANCHI E SCHIENA URTO

N° PROGRAMMA -TRATTAMENTO	
29	# FIANCHI E SCHIENA MODELLANTE
30	# FIANCHI E SCHIENA MANTENIMENTO
31	ADDOME URTO
32	ADDOME MODELLANTE
33	ADDOME MANTENIMENTO
34	# ADDOME URTO
35	# ADDOME MODELLANTE
36	# ADDOME MANTENIMENTO
37	CULOTTES CHEVAL URTO
38	CULOTTES CHEVAL MODELLANTE
39	CULOTTES CHEVAL MANTENIMENTO
40	# CULOTTES CHEVAL URTO
41	# CULOTTES CHEVAL MODELLANTE
42	# CULOTTES CHEVAL MANTENIMENTO
43	GLUTEI URTO
44	GLUTEI MODELLANTE
45	GLUTEI MANTENIMENTO
46	# GLUTEI URTO
47	# GLUTEI MODELLANTE
48	# GLUTEI MANTENIMENTO
49	ESTERNO COSCE URTO
50	ESTERNO COSCE MODELLANTE
51	ESTERNO COSCE MANTENIMENTO
52	# ESTERNO COSCE URTO
53	# ESTERNO COSCE MODELLANTE
54	# ESTERNO COSCE MANTENIMENTO
55	INTERNO COSCE URTO
56	INTERNO COSCE MODELLANTE
57	INTERNO COSCE MANTENIMENTO
58	# INTERNO COSCE URTO

N° PROGRAMMA -TRATTAMENTO	
59	# INTERNO COSCE MODELLANTE
60	# INTERNO COSCE MANTENIMENTO
61	GINOCCHIA URTO
62	GINOCCHIA MODELLANTE
63	GINOCCHIA MANTENIMENTO
64	# GINOCCHIA URTO
65	# GINOCCHIA MODELLANTE
66	# GINOCCHIA MANTENIMENTO
67	INTERNO GINOCCHIA URTO
68	INTERNO GINOCCHIA MODELLANTE
69	INTERNO GINOCCHIA MANTENIMENTO
70	# INTERNO GINOCCHIA URTO
71	# INTERNO GINOCCHIA MODELLANTE
72	# INTERNO GINOCCHIA MANTENIMENTO
73	POLPACCI URTO
74	POLPACCI MODELLANTE
75	POLPACCI MANTENIMENTO
76	# POLPACCI URTO
77	# POLPACCI MODELLANTE
78	# POLPACCI MANTENIMENTO
79	PELLE BUCCIA D'ARANCIA DRENANTE
80	PELLE BUCCIA D'ARANCIA LEVIGANTE
81	PELLE BUCCIA D'ARANCIA MANTENIMENTO
82	# PELLE BUCCIA D'ARANCIA DRENANTE
83	# PELLE BUCCIA D'ARANCIA LEVIGANTE
84	# PELLE BUCCIA D'ARANCIA MANTENIMENTO
85	PELLE RUVIDA RIATTIVANTE

PROGRAMMI ESTETICA E BENESSERE

IT


N° PROGRAMMA -TRATTAMENTO		N° PROGRAMMA -TRATTAMENTO	
86	PELLE RUVIDA LEVIGANTE	119	DOPPIO MENTO RIDUZIONE
87	PELLE RUVIDA MANTENIMENTO	120	# DOPPIO MENTO RIDUZIONE
88	# PELLE RUVIDA RIATTIVANTE	121	ACNE E BRUFOLI
89	# PELLE RUVIDA LEVIGANTE	122	# ACNE E BRUFOLI
90	# PELLE RUVIDA MANTENIMENTO	123	TRATTAMENTO COUPEROSE
91	SMAGLIATURE	124	# TRATTAMENTO COUPEROSE
92	# SMAGLIATURE	125	CUOIO CAPELLUTO STIMOLANTE
93	CICATRICI	126	CUOIO CAPELLUTO PULIZIA
94	# CICATRICI	127	CUOIO CAPELLUTO ATTIVANTE
95	MACCHIE DELLA PELLE	128	# CUOIO CAPELLUTO STIMOLANTE
96	# MACCHIE DELLA PELLE	129	# CUOIO CAPELLUTO PULIZIA
97	VENE VARICOSE	130	# CUOIO CAPELLUTO ATTIVANTE
98	# VENE VARICOSE	131	VEICOLANTE ALTO
99	VISO ESFOLIANTE	132	VEICOLANTE MEDIO
100	VISO MASSAGGIO	133	VEICOLANTE BASSO
101	VISO LEVIGANTE	134	# VEICOLANTE ALTO
102	# VISO ESFOLIANTE	135	# VEICOLANTE MEDIO
103	# VISO MASSAGGIO	136	# VEICOLANTE BASSO
104	# VISO LEVIGANTE	137	UOMO URTO
105	VISO AZIONE ANTI-AGE	138	UOMO MODELLANTE
106	# VISO AZIONE ANTI-AGE	139	UOMO MANTENIMENTO
107	VISO CONTORNO OCCHI	140	# UOMO URTO
108	# VISO CONTORNO OCCHI	141	# UOMO MODELLANTE
109	VISO TONIFICANTE	142	# UOMO MANTENIMENTO
110	# VISO TONIFICANTE	143	IMMERSIONE 1 MHz
111	COLLO TONIFICANTE	144	IMMERSIONE 3 MHz
112	# COLLO TONIFICANTE	145	# IMMERSIONE 1 MHz
113	COLLO ANTIRUGHE	146	# IMMERSIONE 3 MHz
114	# COLLO ANTIRUGHE	da 303 a 312	PROGRAMMI LIBERI
115	DÈCOLLETÈ TONIFICANTE		
116	# DÈCOLLETÈ TONIFICANTE		
117	DÈCOLLETÈ ANTIRUGHE	313	TEST MANIPOLO
118	# DÈCOLLETÈ ANTIRUGHE		

PROGRAMMI ESTETICA E BENESSERE SPECIFICHE

CELLULITE GLUTEI

NUMERO PROGRAMMA E DURATA


n° 1	12 minuti
n° 2 T.E.L.I.™	20 minuti

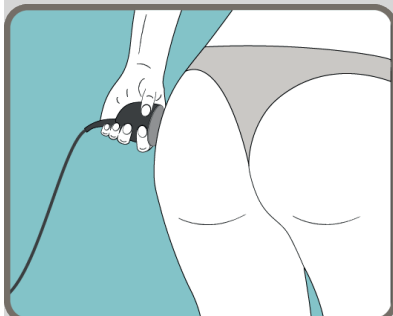

CELLULITE ARTI SUPERIORI

NUMERO PROGRAMMA E DURATA

n° 7	12 minuti
n° 8 T.E.L.I.™	20 minuti

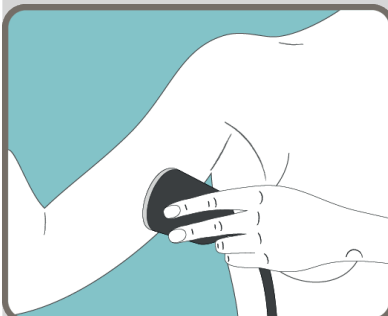


ESTERNO BRACCIA

NUMERO PROGRAMMA E DURATA

n° 13 URTO	12 minuti
n° 14 MODELLANTE	12 minuti
n° 15 MANTENIMENTO	12 minuti

T.E.L.I.™


n° 16 URTO	20 minuti
n° 17 MODELLANTE	20 minuti
n° 18 MANTENIMENTO	20 minuti

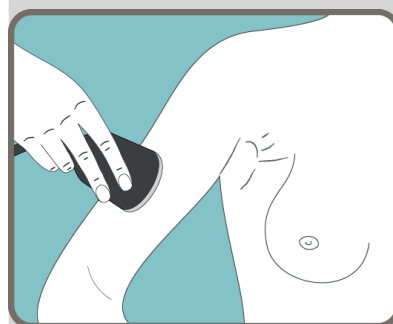

CELLULITE ADDOME

NUMERO PROGRAMMA E DURATA

n° 3	12 minuti
n° 4 T.E.L.I.™	20 minuti

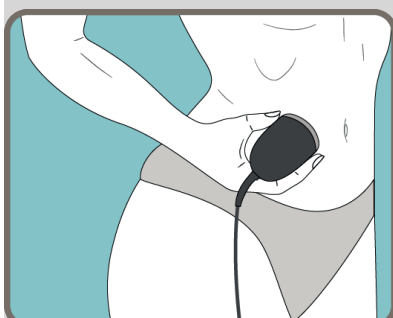

TESSUTO ADIPOSO

NUMERO PROGRAMMA E DURATA

n° 9	12 minuti
n° 10 T.E.L.I.™	20 minuti

Durante l'applicazione, far scorrere la testina sulla zona interessata con movimenti lenti e circolari.


INTERNO BRACCIA

NUMERO PROGRAMMA E DURATA

n° 19 URTO	12 minuti
n° 20 MODELLANTE	12 minuti
n° 21 MANTENIMENTO	12 minuti

T.E.L.I.™


n° 22 URTO	20 minuti
n° 23 MODELLANTE	20 minuti
n° 24 MANTENIMENTO	20 minuti

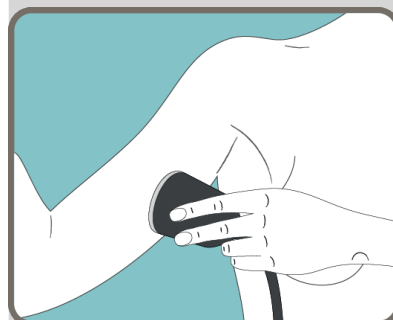

CELLULITE ARTI INFERIORI

NUMERO PROGRAMMA E DURATA

n° 5	12 minuti
n° 6 T.E.L.I.™	20 minuti

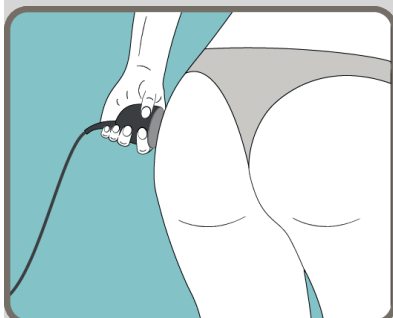

TONIFICAZIONE TESSUTI


NUMERO PROGRAMMA E DURATA

n° 11	12 minuti
n° 12 T.E.L.I.™	20 minuti


Durante l'applicazione, far scorrere la testina sulla zona interessata con movimenti lenti e circolari.

PROGRAMMI ESTETICA E BENESSERE SPECIFICHE


FIANCHI E SCHIENA	
NUMERO PROGRAMMA E DURATA	
n° 25 URTO	12 minuti
n° 26 MODELLANTE	12 minuti
n° 27 MANTENIMENTO	12 minuti
T.E.L.I.™	
n° 28 URTO	20 minuti
n° 29 MODELLANTE	20 minuti
n° 30 MANTENIMENTO	20 minuti

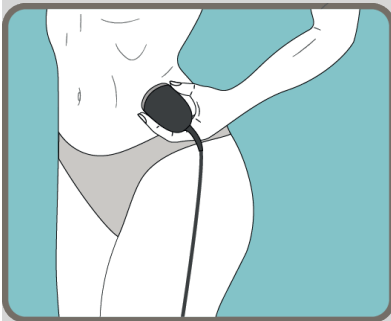


CULOTTES CHEVAL	
NUMERO PROGRAMMA E DURATA	
n° 37 URTO	12 minuti
n° 38 MODELLANTE	12 minuti
n° 39 MANTENIMENTO	12 minuti
T.E.L.I.™	
n° 40 URTO	20 minuti
n° 41 MODELLANTE	20 minuti
n° 42 MANTENIMENTO	20 minuti

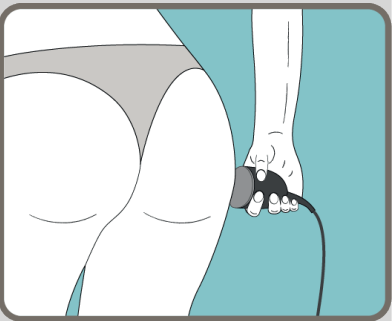


ESTERNO COSCE	
NUMERO PROGRAMMA E DURATA	
n° 49 URTO	12 minuti
n° 50 MODELLANTE	12 minuti
n° 51 MANTENIMENTO	12 minuti
T.E.L.I.™	
n° 52 URTO	20 minuti
n° 53 MODELLANTE	20 minuti
n° 54 MANTENIMENTO	20 minuti

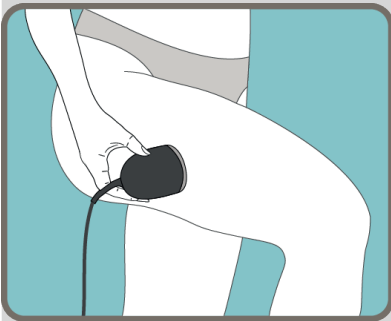


ADDOME	
NUMERO PROGRAMMA E DURATA	
n° 31 URTO	12 minuti
n° 32 MODELLANTE	12 minuti
n° 33 MANTENIMENTO	12 minuti
T.E.L.I.™	
n° 34 URTO	20 minuti
n° 35 MODELLANTE	20 minuti
n° 36 MANTENIMENTO	20 minuti

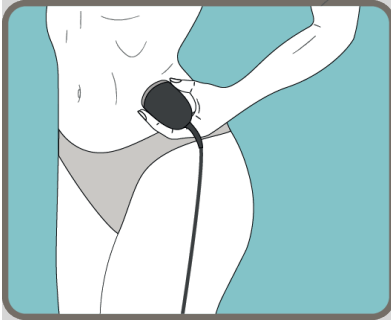

GLUTEI	
NUMERO PROGRAMMA E DURATA	
n° 43 URTO	12 minuti
n° 44 MODELLANTE	12 minuti
n° 45 MANTENIMENTO	12 minuti
T.E.L.I.™	
n° 46 URTO	20 minuti
n° 47 MODELLANTE	20 minuti
n° 48 MANTENIMENTO	20 minuti

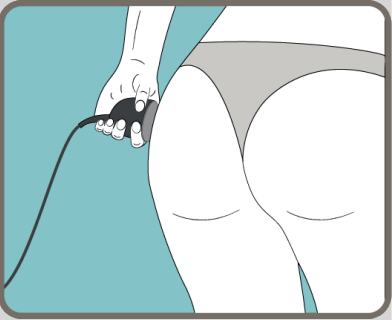


INTERNO COSCE	
NUMERO PROGRAMMA E DURATA	
n° 55 URTO	12 minuti
n° 56 MODELLANTE	12 minuti
n° 57 MANTENIMENTO	12 minuti
T.E.L.I.™	
n° 58 URTO	20 minuti
n° 59 MODELLANTE	20 minuti
n° 60 MANTENIMENTO	20 minuti

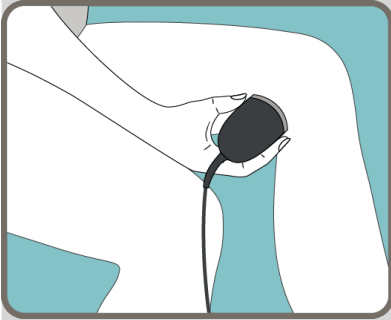


PROGRAMMI ESTETICA E BENESSERE SPECIFICHE


GINOCCHIA	
NUMERO PROGRAMMA E DURATA	
n° 61 URTO	12 minuti
n° 62 MODELLANTE	12 minuti
n° 63 MANTENIMENTO	12 minuti
T.E.L.I.™	
n° 64 URTO	20 minuti
n° 65 MODELLANTE	20 minuti
n° 66 MANTENIMENTO	20 minuti

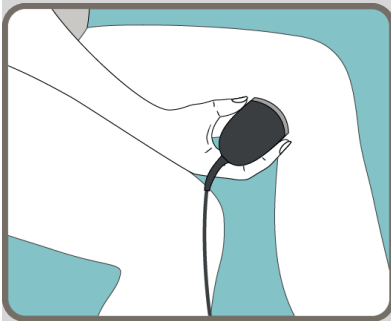


POLPACCI	
NUMERO PROGRAMMA E DURATA	
n° 73 URTO	12 minuti
n° 74 MODELLANTE	12 minuti
n° 75 MANTENIMENTO	12 minuti
T.E.L.I.™	
n° 76 URTO	20 minuti
n° 77 MODELLANTE	20 minuti
n° 78 MANTENIMENTO	20 minuti

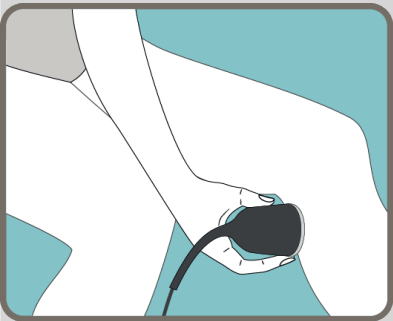


PELLE RUVIDA	
NUMERO PROGRAMMA E DURATA	
n° 85 RIATTIVANTE	12 minuti
n° 86 LEVIGANTE	12 minuti
n° 87 MANTENIMENTO	12 minuti
T.E.L.I.™	
n° 88 RIATTIVANTE	20 minuti
n° 89 LEVIGANTE	20 minuti
n° 90 MANTENIMENTO	20 minuti

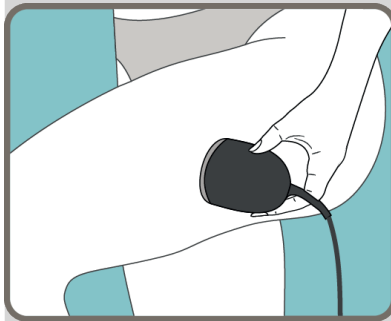

INTERNO GINOCCHIA	
NUMERO PROGRAMMA E DURATA	
n° 67 URTO	12 minuti
n° 68 MODELLANTE	12 minuti
n° 69 MANTENIMENTO	12 minuti
T.E.L.I.™	
n° 70 URTO	20 minuti
n° 71 MODELLANTE	20 minuti
n° 72 MANTENIMENTO	20 minuti

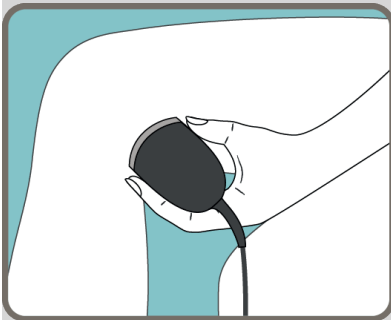

PELLE BUCCIA D'ARANCIA	
NUMERO PROGRAMMA E DURATA	
n° 79 DRENANTE	12 minuti
n° 80 LEVIGANTE	12 minuti
n° 81 MANTENIMENTO	12 minuti
T.E.L.I.™	
n° 82 DRENANTE	20 minuti
n° 83 LEVIGANTE	20 minuti
n° 84 MANTENIMENTO	20 minuti

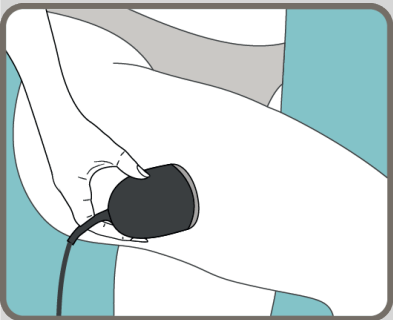

SMAGLIATURE	
NUMERO PROGRAMMA E DURATA	
n° 91	12 minuti
n° 92 T.E.L.I.™	20 minuti

Durante l'applicazione, far scorrere la testina sulla zona interessata con movimenti lenti e circolari.

PROGRAMMI ESTETICA E BENESSERE SPECIFICHE

CICATRICI

NUMERO PROGRAMMA E DURATA


n° 93	12 minuti
n° 94 T.E.L.I.™	20 minuti

Durante l'applicazione, far scorrere la testina sulla zona interessata con movimenti lenti e circolari.

VISO

NUMERO PROGRAMMA E DURATA


n° 99 ESFOLIANTE	12 minuti
n° 100 MASSAGGIO	12 minuti
n° 101 LEVIGANTE	12 minuti
T.E.L.I.™	
n° 102 ESFOLIANTE	20 minuti
n° 103 MASSAGGIO	20 minuti
n° 104 LEVIGANTE	20 minuti

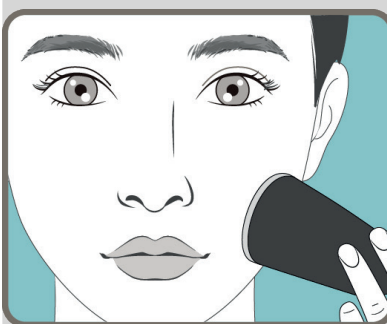

VISO CONTORNO OCCHI

NUMERO PROGRAMMA E DURATA

n° 107	12 minuti
n° 108 T.E.L.I.™	20 minuti

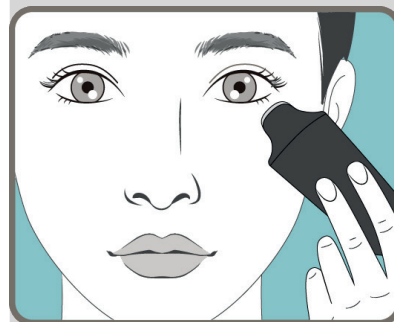

MACCHIE DELLA PELLE

NUMERO PROGRAMMA E DURATA


n° 95	12 minuti
n° 96 T.E.L.I.™	20 minuti

Durante l'applicazione, far scorrere la testina sulla zona interessata con movimenti lenti e circolari.

VISO TONIFICANTE

NUMERO PROGRAMMA E DURATA


n° 109	12 minuti
n° 110 T.E.L.I.™	20 minuti

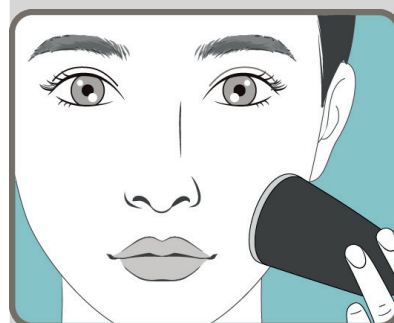

VISO AZIONE ANTI-AGE

NUMERO PROGRAMMA E DURATA


n° 105	12 minuti
n° 106 T.E.L.I.™	20 minuti

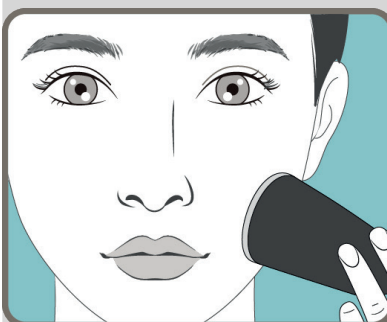

VENE VARICOSE

NUMERO PROGRAMMA E DURATA


n° 97	12 minuti
n° 98 T.E.L.I.™	20 minuti

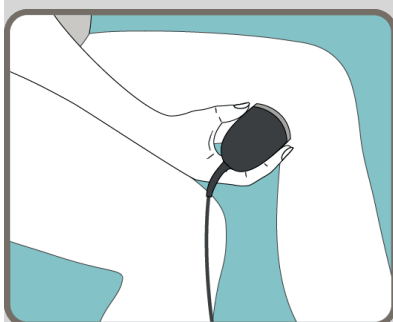

COLLO TONIFICANTE


NUMERO PROGRAMMA E DURATA

n° 111	12 minuti
n° 112 T.E.L.I.™	20 minuti

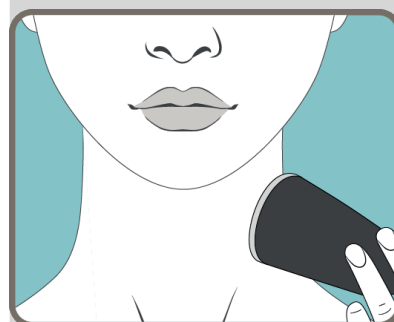


COLLO ANTIRUGHE
NUMERO PROGRAMMA E DURATA

n° 113	12 minuti
n° 114 T.E.L.I.™	20 minuti

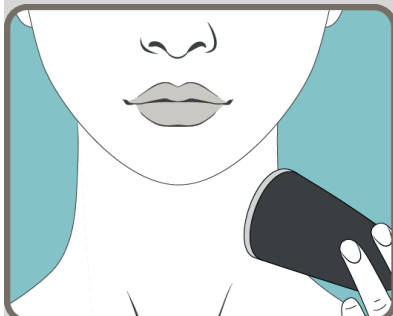
DOPPIO MENTO RIDUZIONE
NUMERO PROGRAMMA E DURATA


n° 119	12 minuti
n° 120 T.E.L.I.™	20 minuti

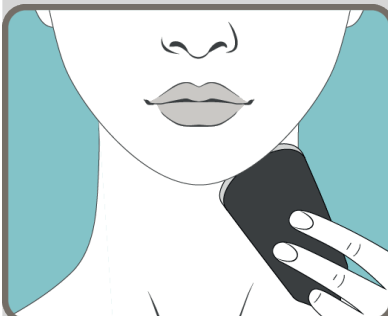
CUOIO CAPELLUTO
NUMERO PROGRAMMA E DURATA


n° 125 STIMOLANTE	12 minuti
n° 126 PULZIA	12 minuti
n° 127 ATTIVANTE	12 minuti

T.E.L.I.™

n° 128 STIMOLANTE	20 minuti
n° 129 PULZIA	20 minuti
n° 130 ATTIVANTE	20 minuti

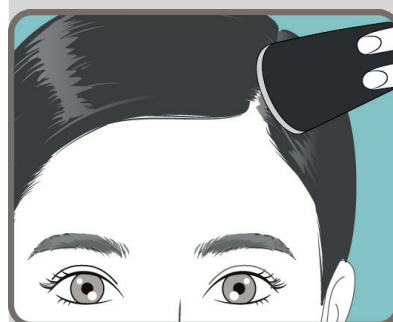
DÈCOLLETÈ TONIFICANTE
NUMERO PROGRAMMA E DURATA

n° 115	12 minuti
n° 116 T.E.L.I.™	20 minuti

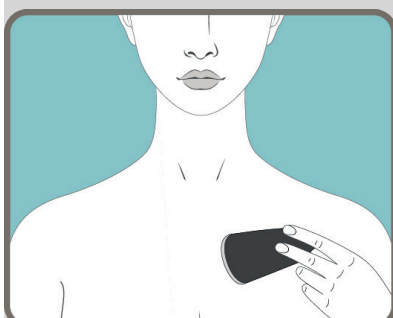
ACNE E BRUFOLI
NUMERO PROGRAMMA E DURATA


n° 121	12 minuti
n° 122 T.E.L.I.™	20 minuti


VEICOLANTE
NUMERO PROGRAMMA E DURATA


n° 131 ALTO	12 minuti
n° 132 MEDIO	12 minuti
n° 133 BASSO	12 minuti

T.E.L.I.™

n° 134 ALTO	20 minuti
n° 135 MEDIO	20 minuti
n° 136 BASSO	20 minuti

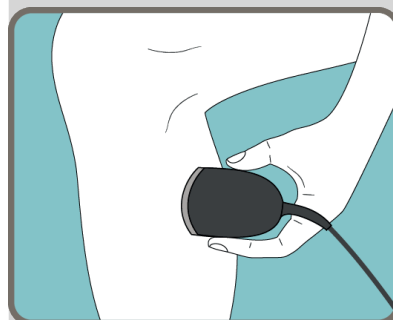
DÈCOLLETÈ ANTIRUGHE
NUMERO PROGRAMMA E DURATA

n° 117	12 minuti
n° 118 T.E.L.I.™	20 minuti

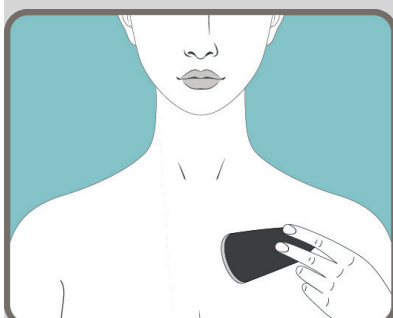
TRATTAMENTO COUPEROSE
NUMERO PROGRAMMA E DURATA

n° 123	12 minuti
n° 124 T.E.L.I.™	20 minuti




PROGRAMMI ESTETICA E BENESSERE SPECIFICHE

UOMO

NUMERO PROGRAMMA E DURATA


n° 137 URTO	12 minuti
n° 138 MODELLANTE	12 minuti
n° 139 MANTENIMENTO	12 minuti
T.E.L.I.™	
n° 140 URTO	20 minuti
n° 141 MODELLANTE	20 minuti
n° 142 MANTENIMENTO	20 minuti

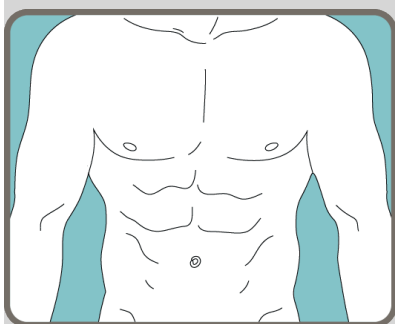

IMMERSIONE

NUMERO PROGRAMMA E DURATA

n° 143 - 1 MHz	12 minuti
n° 144 - 3 MHz	12 minuti
T.E.L.I.™	
n° 145 - 1 MHz	20 minuti
n° 146 - 3 MHz	20 minuti

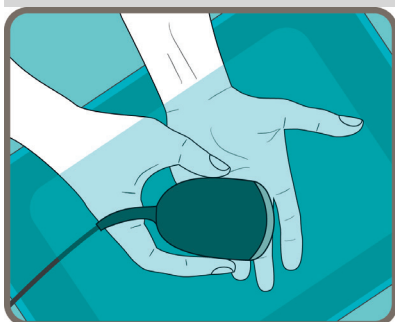

[illegible]

MESIS



Stampato in Italia

Distribuito da Vima s.r.l. Via Condove 11, 10129, Torino, Italy
email: assistentatecnica@mesis.eu - www.mesis.eu